

機械器具 21 内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003

「生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ」の構成品

カブノスタットCO₂センサケーブル TypeVメインストリームCO₂ SU エアウェイアダプタ 成人・小児用 TypeVメインストリームCO₂ SU エアウェイアダプタ 成人・小児用 マウスピース付 TypeVメインストリームCO₂ SU エアウェイアダプタ 新生児用 TypeVメインストリームCO₂ エアウェイアダプタ 新生児用 TypeVメインストリームCO₂ エアウェイアダプタ 成人・小児用 TypeVカブノスタットCO₂ マスクL 成人用 TypeVカブノスタットCO₂ マスク 成人用 TypeVカブノスタットCO₂ マスク 小児用 TypeVメインストリームCO₂アクセサリセット TypeV

【禁忌・禁止】


接続する生体情報モニタの取扱説明書を参照してください。

再使用禁止

・構成品には単回使用に限るものがある。

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

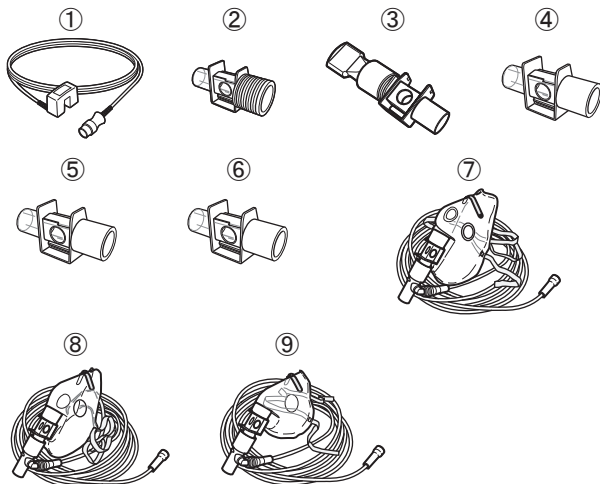

【使用目的、効能又は効果】

患者の呼吸気中のCO₂濃度のモニタリングのために使用します。


【品目仕様等】

接続する機器の添付文書を参照してください。

【操作方法又は使用方法等】

使用前には、必ず記載されたすべての注意事項をお読みください。

1. CO₂センサケーブルを生体情報モニタのCO₂コネクタへ接続します。
2. CO₂センサをエアウェイアダプタへ押し込みます。

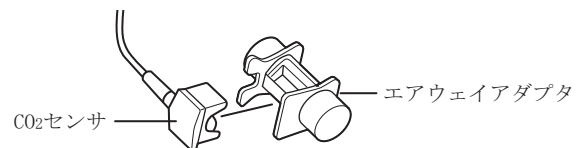


正しく設置すると、かっちり固定されます。

生体情報モニタにプロンプト表示された場合にはゼロ校正してください。


詳細は、生体情報モニタの使用説明書を参照してください。

①	カブノスタットCO ₂ センサ 2.4mケーブル付 TypeV HXA-VC02M-CO2M	
②	メインストリームCO ₂ SU エアウェイアダプタ 成人・小児用 TypeV HXA-VC02M-SUAA	◆
③	メインストリームCO ₂ SU エアウェイアダプタ 成人・小児用 マウスピース付 TypeV HXA-VC02M-SUAM	◆
④	メインストリームCO ₂ SU エアウェイアダプタ 新生児用 TypeV HXA-VC02M-SUAN	◆
⑤	メインストリームCO ₂ エアウェイアダプタ 新生児用 TypeV HXA-VC02M-RAN	
⑥	メインストリームCO ₂ エアウェイアダプタ 成人・小児用 TypeV HXA-VC02M-RAA	
⑦	カブノスタットCO ₂ マスクL 成人用 TypeV HXA-VC02M-MLA	◆
⑧	カブノスタットCO ₂ マスク 成人用 TypeV HXA-VC02M-MA	◆
⑨	カブノスタットCO ₂ マスク 小児用 TypeV HXA-VC02M-MP	◆
	メインストリームCO ₂ アクセサリセット TypeV HXA-VC02M-MSKT ・カブノスタットCO ₂ センサ 2.4mケーブル付 ・カブノスタットCO ₂ センサ ホールディングクリップ(非医療機器) ・メインストリームCO ₂ SU エアウェイアダプタ 成人・小児用 マウスピース付 ・メインストリームCO ₂ SU エアウェイアダプタ 新生児用	

◆は単回使用品です。

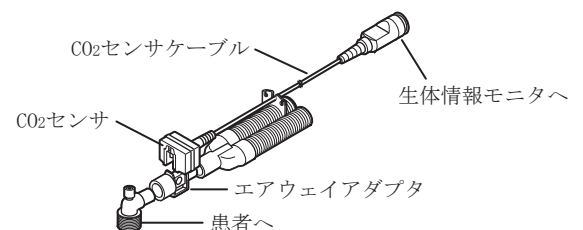

マスクを使用する場合

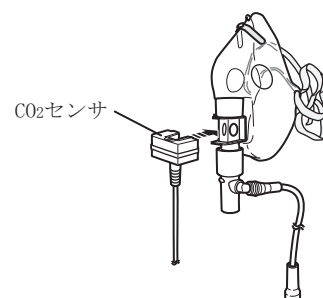

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

- ・使用前に破損がないことを確認してください。
- ・院内の廃棄手順に従い廃棄してください。
- ・マスクを使用する場合には、患者からの呼気が内部で混合されCO₂の測定値が低くなる場合があります。
- ・過剰な分泌物が使用中のアダプタに認められた場合、アダプタが使い捨ての場合には交換し、再使用可能の場合には取り外して洗浄してから設置しなおしてください。
- ・ウォーターコンテナを液体に浸さないでください。
- ・洗浄剤・消毒剤は推奨されたもの以外使用しないでください。
- ・センサやケーブルを液体に浸さないでください。
- ・洗浄・消毒中はピンが湿らないように注意してください。
- ・洗浄および消毒の前にはケーブルをCO₂モジュールおよび患者から必ず切断してください。
- ・センサやケーブルは、長期的な損傷を避けるため、必要な場合にのみ院内の方針によって規定された通りに消毒することをお勧めします。
- ・ケーブルおよびセンサを再度使用する前に、ケーブルが乾燥し、センサウィンドウが乾燥し清潔であることを確認してください。
- ・湿ったセンサや濃縮物が付着したセンサは使用しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

	使用環境	保存環境
温度範囲	10～40℃	-10～55℃
湿度範囲	10～90%	<90%

【保守・点検に係る事項】

洗浄

1. 水で湿らせた綿布または柔らかい布で洗浄します。
2. 洗浄後、柔らかい布で水分を拭き取り、空気乾燥させてください。

消毒

推奨する消毒剤：エタノール70%、イソプロパノール70%、グルタルアルデヒド型（2%）を含む消毒剤

1. 上記の方法で洗浄後、推奨された消毒剤を使用し、綿布または柔らかい布でおこなってください。
2. 消毒後は必ず水で湿らせた柔らかい布で残留した消毒剤を拭き取り、空気乾燥させてください。

【包装】

1個単位で包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地
カスタマサポートセンター
0120-103-203（24時間受付/通話料無料）

外国製造業者：Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO.,LTD. (中国)

シンセン マインドレー バイオメディカル
エレクトロニクスカンパニーリミテッド

販 売 元：オムロンコーリン株式会社

〒112-0002 東京都文京区小石川一丁目12番地14号
日本生命小石川ビル



046-006139-00(1.0)

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。